




日本生まれの
リオネット

Japan Brand


))RIONET

リオネット補聴器総合カタログ

vol.03

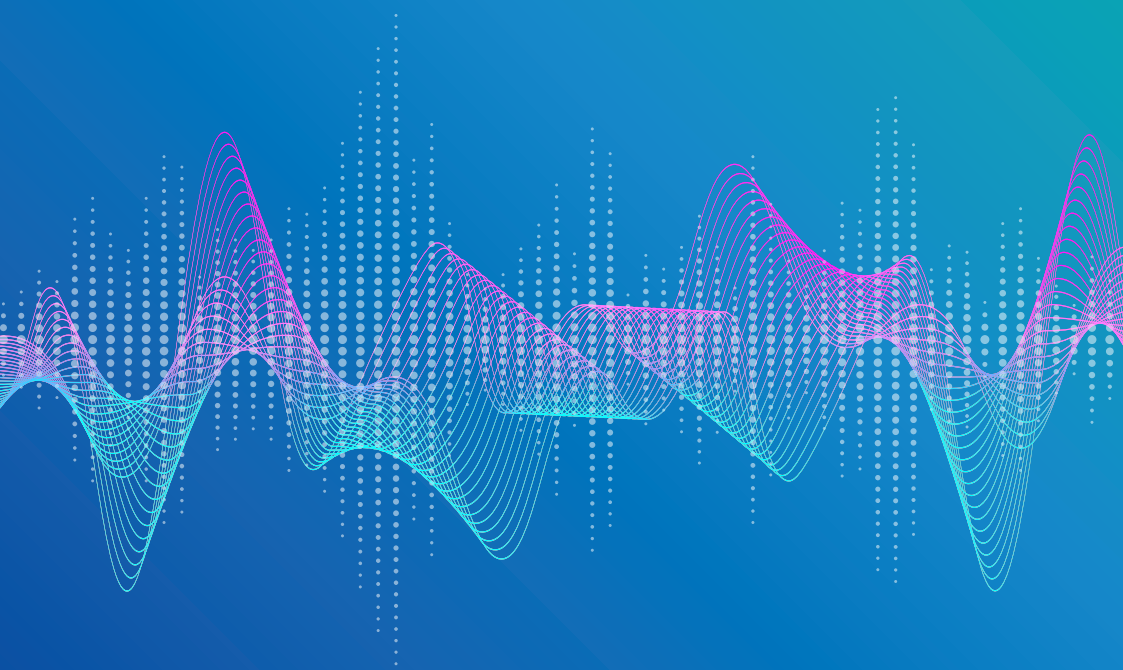

その聞こえのために すべてを。

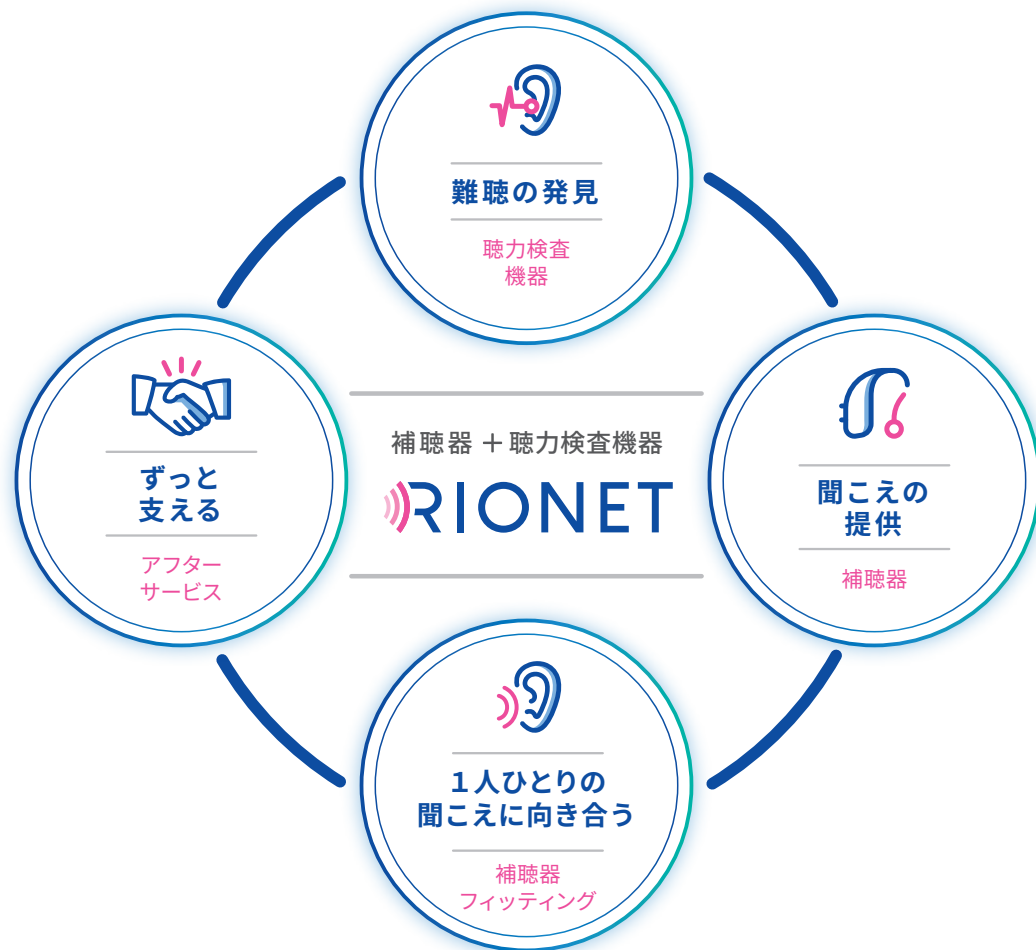

リオネットは、

その、ひとりの聞こえのために、

課題を発見することから不安のない日常を取り戻すまで、
寄り添う心をひとつにして経験と技術のすべてを注ぎます。

人と人、人と社会がもっと通じ合う未来へ向かって。



日本で聞こえに寄り添って75年以上。
快適な聞こえ、聞こえる喜びを
お届けすることがリオネットの使命です。

多くの日本人の耳を知る「日本ブランド」



1948年に初めて国産の量産型補聴器を発売して以来、リオネット補聴器と日本人の耳との関わりは75年以上になります。お客様の声を製品開発に反映し、快適な聞こえと、聞こえる喜びをお届けすることを使命とし、より良い補聴器作りに挑み続けています。



J a p a n B r a n d

目次 Index

リオネットについて	5
聞こえと補聴器について	
聞こえと難聴について	6
補聴器について	8
補聴器購入の流れ	10
補聴器の形と装用イメージ	12
オーダーメイド補聴器について	14
機能	
機能ピックアップ	16
シリーズ別機能比較	18
補聴器ラインアップ	
リオネット2シリーズ	20
リオネットプラスシリーズ	24
LSシリーズ	28

その他ラインアップ	29
子ども向けほちょうき	32
キッズ応援プロジェクト	33
アクセサリ	
アクセサリ	34
リオネット補聴器アンバサダーからのメッセージ	
俳優・歌手 井上順さん	38
プロボディーボーダー YUMIEさん	40
性能・機能一覧／保証	
性能一覧	42
機能一覧	50
リオネットの安心保証制度	52
よくいただくご質問	54

一人ひとりに寄り添って「お客様最優先」



補聴器は、お客様に使い続けていただくことではじめて、その役割を果たすことができます。だからこそ、私たちは関わり続けます。お客様が本当にご自身に合った補聴器と出会い、暮らしの中で使いこなせるようになるまで。そのためのすべてが、私たちの考える補聴器フィッティングです。「初めまして」のその日から、お客様の人生といつも共に。

私たちの宣言

リオネット・ フィッティングポリシー

私たちは、補聴器フィッティングのすべての段階において、お客様に補聴器を使い続ける気持ちになっていただくことを最優先します。

C u s t o m e r F i r s t

「聞こえ」の簡単チェック

当てはまる項目を
チェックしてみましょう。

チェックが1つでもあれば、
補聴器が有効かもしれま
せん。まずは、耳鼻咽喉科
へのご相談をおすすめしま
す。

- ☐ …テレビの音大きいと言われる。
- ☐ …会議で相手の発言が聞きとりにくい。
- ☐ …聞き間違えることが多い。
- ☐ …会話が聞きとれず、聞き返してしまう。
- ☐ …病院などで呼ばれても気づかないことがある。
- ☐ …後ろから呼ばれても気づかない。



耳のしくみと難聴の種類

難聴の種類

伝音難聴


中耳炎等で鼓膜に穴があいたり、耳小骨の動きが悪くなるなど外耳および中耳の部分に生じた障害のために起こる難聴です。

感音難聴

内耳、蝸牛神経、脳に生じた障害のために起こる難聴です。加齢による難聴も感音難聴の一種です。


混合性難聴

伝音難聴と感音難聴の両方の障害をもつ難聴です。

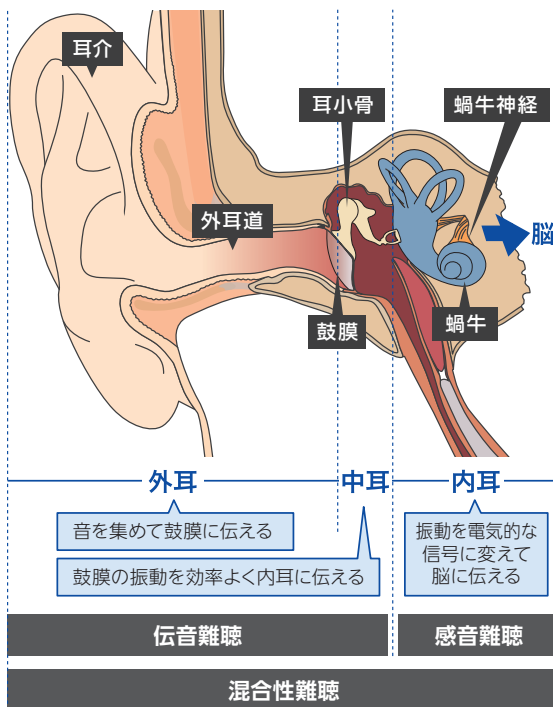

聞こえの程度と年齢による聴力低下

聴力は年齢とともに徐々に変化していきます。

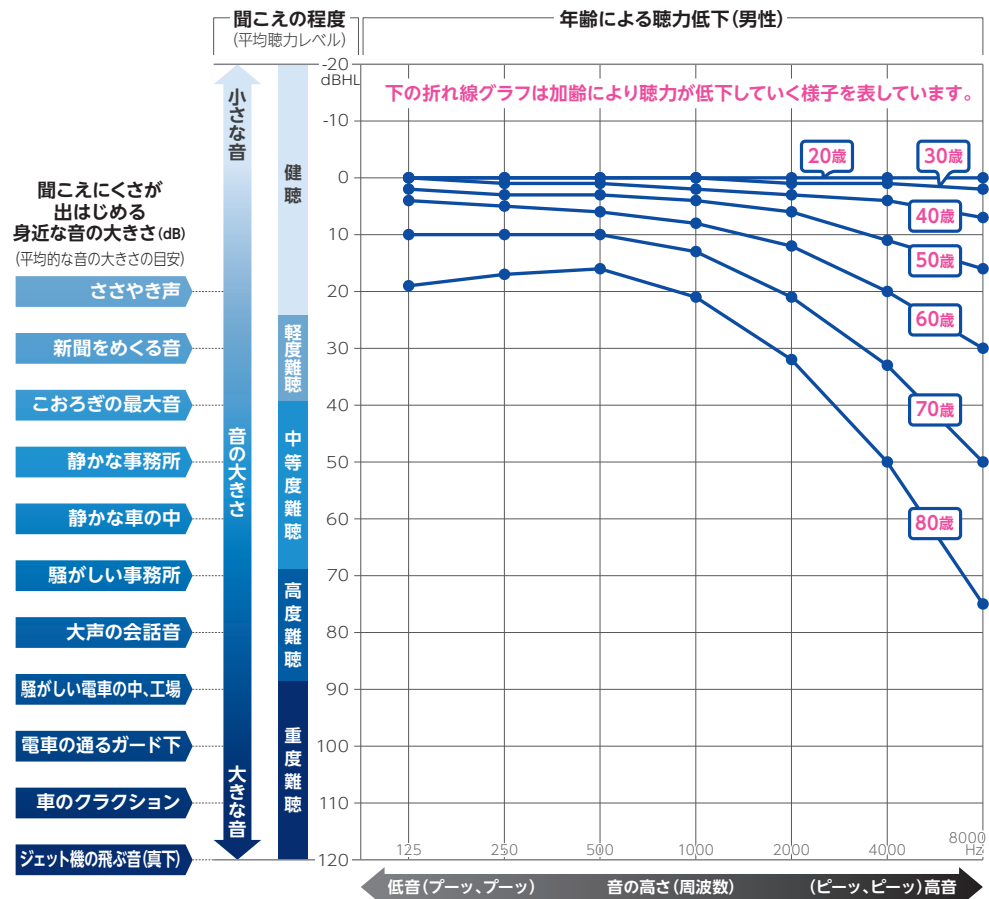

〈折れ線グラフの参考文献〉 ISO 7029:2017 Acoustics — Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age and gender

平均聴力レベル (dBHL)

25	30	40	50	60	70	80	90	100
軽度	軽度難聴	中等度	中等度難聴	高度	高度難聴	重度	重度難聴	
25dBHL以上 40dBHL未満		40dBHL以上 70dBHL未満		70dBHL以上 90dBHL未満		90dBHL以上		
小さな声が聞きとりにくい。		普通の大さき声が聞きとりにくい。		大きな声でも聞きとりにくい。		かなり大きな声でも聞きとりにくい。		

補聴器とは


補聴器は、聞こえを補う医療機器です。
大きく分けてマイク、増幅器、イヤホンの3つの部分からできています。マイクに入った音を増幅器で大きくしてイヤホンから出します。
ただ音を大きくするのではなく、周囲の騒音などを抑えることが補聴器の大切な機能です。
お客様一人ひとりの聞こえや要望に合わせて細かな調整ができることも補聴器の特長です。

より良い聞こえのために

音の聞こえにくさに慣れてしまった状態で、最初から十分な音量で聞くとうるさいと感じやすいので、徐々に音量を上げるなど、お客様の聞こえに合わせて段階的に調整を行います。
聞こえの調整期間や回数は個人によって異なりますので補聴器販売員にご相談ください。



段階的な調整のイメージ

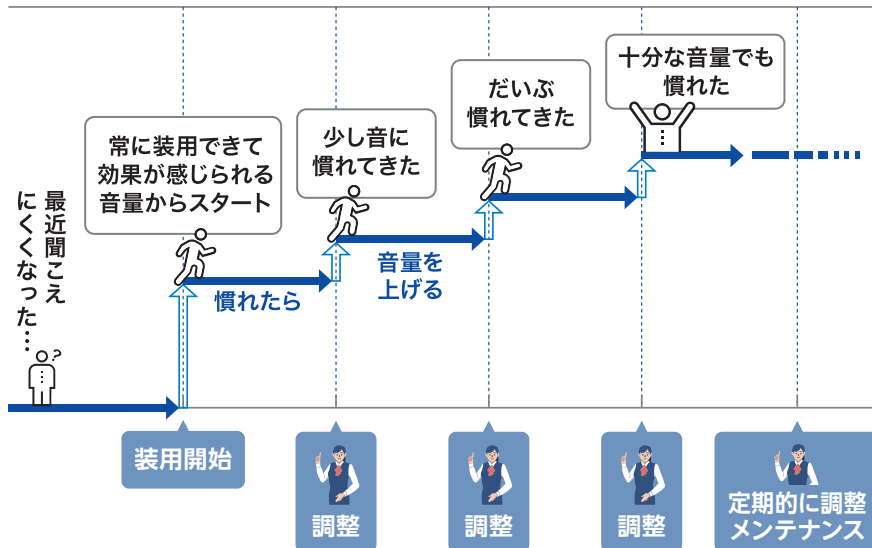

— 聞こえに合わせて調整を行います —

両耳装用のメリット

補聴器を両耳装用すると、片耳装用と比べて以下のような効果が期待できます。



雑音下でも聞きとりやすい

左右の耳で補い合うので、雑音下でも音や言葉が聞きとりやすくなります。



音の方向がわかりやすい

後ろから近づいてくる車や、自転車のベルなどの音の方向がわかりやすくなります。



より豊かに聞こえて楽しめる

音の広がりや奥行きが増し、立体感のある聞こえでより楽しめます。



聞きやすい範囲が広がる

片耳装用に比べ、聞こえの範囲がより広がります。

！ 両耳装用の効果について

「左右の聴力差が大きい」、「他の理由で効果が実感できない」などのさまざまな条件により、両耳装用の効果が得られない場合もあるため、すべての方に両耳装用が適しているということではありません。
両耳装用が適しているかどうかは、耳鼻咽喉科専門医（または補聴器販売店）にご相談ください。効果の感じ方には個人差があるため、両耳装用の効果はぜひ補聴器販売店で体験してみてください。

補聴器販売店では、どのような流れで、何をするのでしょうか？
一般的な補聴器購入の流れをご紹介します。

※一般的な流れですので、当てはまらない場合もあります。

1



ご来店・ご相談

専門の販売員がお客様の聞こえの状況
やご要望を詳しく伺います。


2



聴力測定

補聴器を選定するために、聴力を測定し
ます。言葉がどれくらい聞きとれているか
も測定します。


3

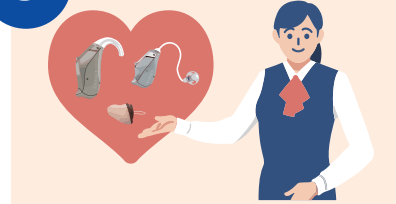

補聴器の選択・調整

聴力データをもとに、お客様の聴力に
合った補聴器をお選びします。お客様の
聴力に合わせて、聞こえや装用感などの
調整を行います。

4

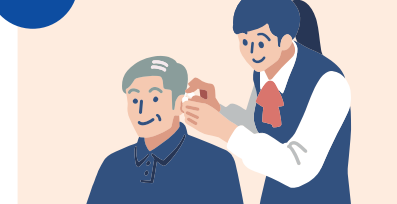

補聴器を試す

実際に補聴器をつけてみます。販売員や
一緒に来店されたご家族と会話したり、
店内のさまざまな音を聞いて装用感を
確認します。

5



補聴効果の確認

補聴器をつけた状態で測定を行います。
この結果により、客観的な補聴器の効果が
わかります。

6



ご購入

補聴器の聞こえや使い方を理解されたら
ご購入となります。

7



補聴器の再調整

ご購入後、より快適な聞こえを保つため
にはこまめな調整が必要です。

8



点検

ご購入後、定期的に販売店で点検するこ
とをおすすめします。汚れなどで補聴器
の音がきちんと出ていないと、聞こえに
も影響があります。

耳あな型 オーダーメイド

一人ひとりの耳の形、聴力に合わせて作るオーダーメイド

スーパーミニカナル^{きわみ}極(CIC)

マイスター*による製作で、さらに小さく目立たない形状を実現したリオネット補聴器最小サイズの補聴器です。

*厳しい社内基準に適合した熟練の製作担当者に与えられる称号です。



軽度
中等度

25~75dBHL

スーパーミニカナル(CIC)

目立たない小型タイプです。鼓膜に近い場所に収まるため、より自然な聞こえが得られます。




軽度
中等度
高度

~85dBHL

カナルエイド

使いやすい小型タイプです。豊富な種類と多彩なオプションが魅力です。

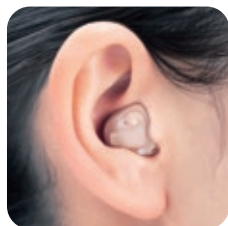

軽度
中等度
高度

~95dBHL

マイエイド

高・重度難聴の方におすすめの、高出力タイプです。



中等度
高度
重度

50~110dBHL

耳かけ型

小型タイプからハイパワータイプまで豊富なデザインから選べる

RIC

従来の耳かけ型の本体内部にあったイヤホンを外耳道内や外耳道入口に配置することで、より自然な聞こえを実現します。



軽度
中等度
高度
重度

~110dBHL

Sチューブ

耳にかけるSチューブは細くて軽やかなつけ心地です。
(有料オプション)



軽度
中等度
高度

~80dBHL

フック

小型タイプから高・重度難聴の方に対応したハイパワータイプまでさまざまな種類があります。



軽度
中等度
高度
重度

~120dBHL

ポケット型

胸ポケットに入れたり首から下げて使うタイプ。高・重度難聴の方に対応したハイパワータイプもあります。



中等度
高度
重度

40~110dBHL

※聴力レベルは、イヤホンや仕様によって変わりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。


既製品にはないオーダーメイドならではの快適性を。
お客様への想いを形にするリオネットのオーダーメイド補聴器。



リオネットのオーダーメイド補聴器は外見から内部構成まで熟練の技術によって一から丹念に作り上げ、お客様一人ひとりに合わせてお作りする“お客様専用”の補聴器です。さらに、さまざまなオプションを加えることでもっと目立ちにくく、もっと使いやすく、“お客様専用”の補聴器にカスタマイズすることが可能です。



オーダーメイド補聴器ができるまで

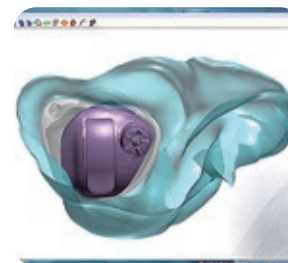

耳型スキャン・モデリング

3Dスキャンした耳型データを元に、耳型に合わせた補聴器のシェルをデザインします。



光造形

補聴器のシェルを、特殊な光造形装置によって正確に立体化します。



組み込み

熟練の技術者が、造形された補聴器のシェルに精密部品を丁寧に組み込みます。

オーダーメイド補聴器刻印サービス

お客様のお名前などをお入れするサービスを無料で行っています。

(耳かけ型補聴器の刻印はHB-A8のみ。有料オプション)




オーダーメイド補聴器ができるまで

rionet.jp/movie/ordermade/



オーダーメイド補聴器のメリット

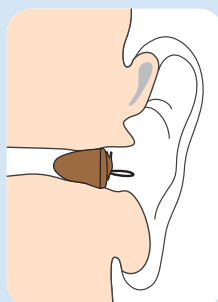

目立たない

耳の中に収まるので、見た目が気になりません。

ぴったり合う

一人ひとりの耳の形に合わせてお作りするので、耳にぴったりと収まり、より自然な装用感を得られます。

自然な聞こえ

鼓膜に近い場所に収まるため、耳本来の聞こえ方に近づき、より自然な聞きとりを可能にします。

邪魔にならない

マスク、メガネなどを着用する時や電話をする時に邪魔になりません。

選べるカラーシェル／フェースプレート (無料オプション)

より目立ちにくくなるチョコレート色のフェースプレートや、左右をわかりやすくできるカラーシェルなど、さまざまなカラーをご用意しています。

HI-C3



HI-C3/HI-C1/HI-C2



HI-C7



フェースプレート



※機種やシリーズにより、選べるカラーが異なります。詳しくは、各シリーズ掲載ページをご覧ください。

耳かけ型補聴器イヤモールド／オーダーイヤチップ

一人ひとりの耳の形に合わせて作る耳せんで、「ハウリング(ピーピー音)」や補聴器の脱落を防ぎます。



※詳しくはP.36をご覧ください。

言葉を聞きとりやすくする「音声強調」

感音難聴では、音を大きくしても言葉がはっきりしないことがあります。これは、蝸牛にある細胞の数が減少してしまうことなどにより生じる現象といわれています。

補聴器で音を大きくするだけでなく、音声の特徴を強調することにより、聞きとりやすくします。



騒がしい場所でも快適に聞こえるようにする「騒音抑制」

エアコンのついた部屋にいたり、車や電車に乗ったときなど、気になる騒音を抑え、快適に聞こえるようにします。さらに「AI NR」は膨大な音環境を学習したAI(人工知能)搭載により、音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。



正面の会話音声を聞きとりやすくする「指向性」

正面以外の音を抑制することにより、正面の会話音声を聞きとりやすくします。



不快なピーピー音を抑える「ハウリングキャンセラー」

補聴器は音が入るマイクと音を出すイヤホンが近い位置にあるので、音量を大きくしようすると、「ピーピー」というハウリングを起こすことがあります。「ハウリングキャンセラー」がついていると、ハウリングを気にすることなく補聴器を使えます。



音環境の変化に対応する「自動モード切替」

周りの環境に合わせて、補聴器が最適なモードへ自動で切り替えます。




※イラストはイメージです。

補聴器とつながって便利な「スマートフォンアプリ」

スマートフォンにインストールしたアプリから補聴器のボリューム、メモリーなどの操作が行えます。


補聴器の操作の他に、「電池残量表示」「補聴器を探す」機能も搭載。また、「セルフ調整機能」では、環境に応じてご自身で聞こえを調整できます。

※対応OS、対応端末につきましては、スマートフォンアプリのダウンロードページをご覧ください。

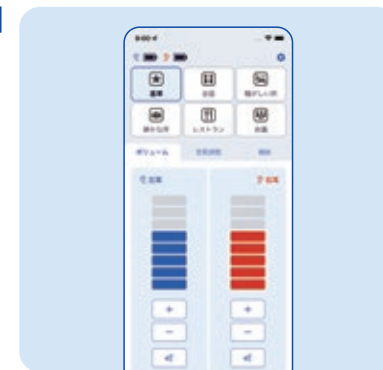

テレビや音楽をもっと楽しめる

テレビアダプターの使用やストリーミングで、テレビの音やスマートフォンの音楽を補聴器に直接届けます。

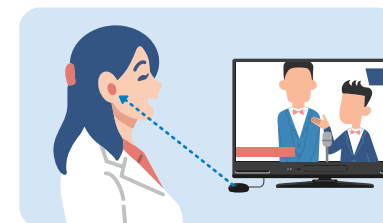

使う人に優しい「充電式補聴器」と「おまかせ回路」

充電式補聴器は、電池交換や電池の買い忘れを心配する必要がありません。

充電式ではない補聴器でも、電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても作動するリオネット独自の「おまかせ回路」で、電池交換が簡単です。



安心がひろがる「耐汗コート」と「防水・防塵保護等級」

高温多湿の日本で生まれたリオネット補聴器は、汗や水への対策に力を入れています。

耐汗コートは補聴器の内部まで特殊コーティングを施すことで、汗や湿気による劣化を軽減します。さらに、防水・防塵保護等級に適合している機種もご用意しています。



※イラストはイメージです。

機能	デジタル 信号処理	音声強調	騒音抑制	衝撃音低減	残響抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	充電式
機能の説明	きめ細かい 調整	言葉を 聞きとりやすく	騒がしい場所でも 聞きとりやすく	突発的な音を 抑える	響く場所でも 聞きとりやすく	正面の声を 聞きとりやすく	ピーピー音を 抑える	環境に合わせて 自動で切替	テレビやスマホに つながる	充電して使える
こんな場面で	 聞きやすい 音に 近づけられる ▽	 会話に 集中 したいとき ▽	 騒がしい 場所に いるとき ▽	 食器を 洗うときや 新聞を 読むとき ▽	 講演会、病院の 待合室などに いるとき ▽	 会議中など、 複数の人と 会話するとき ▽	 電話や 食事のときや、 エレベーターの 中にいるとき ▽	 会話、音楽、 外出時など、 さまざまな シーンで ▽	 テレビを 見るとき ▽	 毎日の 暮らしの 中で ▽
 リオネット2 シリーズ	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
 リオネットプラス シリーズ	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	—	—
LSシリーズ	★★★	★★★	★	★★	—	★★	★★	—	—	—

★の数は、各シリーズの最上位 グレードでの相対評価です。グレード、機種により異なる場合がありますので、詳細は、各シリーズページおよび性能一覧 (P.42～) をご確認ください。

GOOD DESIGN

RIONET 2

リオネット

リオネット初 AI搭載モデル



AI搭載



防水・防塵
保護等級 IP68



充電式

主な特長



騒音下でもAIが聞こえを最適化

膨大な音環境を学習したAI(人工知能)搭載により、AI NR(騒音抑制機能)が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。

*マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載



独自開発のリオネットエンジンがさらに進化

リオネットの最新技術を結集したリオネットエンジン2がクリアで自然な聞こえを届けます。



テレビも電話も快適に

テレビやスマートフォンでの電話の音声を補聴器に直接届けます。

*別途テレビアダプター、スマートフォン等が必要です。



電池交換が不要な充電式

おやすみ前に充電すれば、翌朝から1日中使用できます。

グレード

マキシエンス (DA)

マキシエンスV(DB)

プレミエンス (DC)

プレミエンスV(DD)

NEW

クオリエンス (DE)

機能

デジタル信号処理 (バンド)	音声強調	AI NR	騒音抑制	衝撃音低減	残響抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	セルフ調整機能
きめ細かい 調整	言葉を 聞きとり やすく	AIが騒音下 での聞こえを 最適化	騒がしい 場所でも 聞きとりやすく	突発的な 音を抑える	響く場所 でも聞き とりやすく	正面の声を 聞きとり やすく	ピーピー音 を抑える	環境に 合わせて 自動で切替	スマホで 聞こえを 調整できる
マキシエンス (DA)	24	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
マキシエンスV(DB)	18	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎
プレミエンス (DC)	12	◎	—	△	◎	△	◎	○	—
プレミエンスV(DD)	10	◎	—	△	○	—	◎	○	—
クオリエンス (DE)	8	○	—	△	△	—	△	—	—

保証

無料修理 (自然故障)	紛失補償	事故補償	充電電池 無料交換
4年	2年	4年	2回
4年	1年	2年	1回
3年	—	1年	—
3年	—	1年	—
2年	—	1年	—

※リオネット2シリーズ内での相対評価です。 ※AI NRは東京都立大学 との共同研究の成果が一部含まれます。 ※機種ごとの機能の詳細はP.42～43をご確認ください。 ※保証の詳細はP.52～53をご確認ください。

耳あな型オーダーメイド GOOD DESIGN

 防水・防塵
保護等級 IP68

HI-C7



● スモーキーブラック



● アッシュブラウン



● ベージュ

軽度 中等度 高度 重度

※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。また、難聴の程度によっては、サイズが大きくなる場合があります。

耳かけ型 (RIC) GOOD DESIGN

 防水・防塵
保護等級 IP68

HB-A8



● スモーキーブラック



● アッシュブラウン



● カムグレー



● ペールラベンダー

EX スモールイヤホン



軽度 中等度

ミディアムイヤホン



軽度 中等度 高度

EX パワーイヤホン (ブラウン・ベージュ)



中等度 高度 重度

スマートフォンとつながってもっと便利に。

スマートコントロール2 (スマートフォンアプリ)

ボリューム調整、メモリー切替、ミュート切替
の他、補聴器の電池残量表示、セルフ調整機能*1の使用が可能です。

また、補聴器を紛失した際に補聴器の推定位置を表示することができます*2。

最適な聞こえに 自分でコントロール

セルフ調整機能*3で、音質、デジタル機能の調整が可能です。環境に応じて、ご自身で聞こえを調整できます。

*3 マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載



電話も音楽も聞きやすく*4

スマートフォンと補聴器が
つながり、電話の音声は直接
補聴器に届きます。

また、ダイレクトストリーミングで、スマートフォンの音楽や動画の音声も直接補聴器で聞くことができます。



*4 iOS 14以降を搭載したiPhone、iPod touchおよびiPadOS 14以降を搭載したiPadに対応しています。Androidについては補聴器のアップデートにより、LE Audioに準拠したスマートフォン、タブレットに今後連携が可能となります。

*1 マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載

*2 補聴器の電源が入っていない場合や、補聴器とスマートフォンの距離が離れている等によって補聴器とスマートフォンが接続されていない場合は、「補聴器とスマートフォンの通信が最後に切断された場所」を表示します。



*対応OS、対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

●販売名:補聴器HI-C7DA ●販売名:補聴器HI-C7DB ●販売名:補聴器HI-C7DC ●販売名:補聴器HI-C7DD ●販売名:補聴器HI-C7DE

アクセサリ

リモコン [RH-08]

1年保証

ボリューム調整、メモリー切替、ミュート切替が可能です。



テレビアダプター [RH-07]

1年保証

テレビに接続することで、補聴器へ直接、音を届けます。



充電ケース [HX-C7]

1年保証

HI-C7用



充電ケース [HX-A8]

1年保証

HB-A8用



製品サイトはこちら

●販売名:補聴器HB-A8DA ●販売名:補聴器HB-A8DB ●販売名:補聴器HB-A8DC ●販売名:補聴器HB-A8DD ●販売名:補聴器HB-A8DE

聞こえも、色も、

私のスタイル。

リオネットプラス
新登場

NEW

一人ひとりに合わせた、
聞こえと楽しみを

主な特長



豊富なカラーバリエーションで 自分専用の補聴器に

最大18通りのカラーバリエーションと豊富なオプションで、自分専用の補聴器にカスタマイズできます。



独自開発のリオネットエンジンで 自然な聞こえに

原音に忠実な音作りを目指したリオネットエンジンが出力までの時間を短縮。自然な聞こえを届けます。



音が響く場所でも聞きとりやすく

残響抑制が言葉の聞きとりに影響する残響音を低減します。ホールや会議室など音が響く場所での会話も聞きとりやすくなります。

*プレミエンスVを除く



周りの環境に自動で対応

自動モード切替が周りの環境に合わせて最適な聞こえに自動で切り替えます。

グレード

マキシエンス (FA)

マキシエンスV (FB)


プレミエンス (FC)

プレミエンスV (FD)

機能

	機能								保証		
	デジタル信号処理 (バンド)	音声強調	騒音抑制	衝撃音低減	残響抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	無料修理 (自然故障)	紛失補償	事故補償
	きめ細かい 調整	言葉を 聞きとり やすく	騒がしい 場所でも 聞きとりやすく	突発的な 音を抑える	響く場所 でも聞き とりやすく	正面の声を 聞きとり やすく	ピーピー音を 抑える	環境に 合わせて 自動で切替			
マキシエンス (FA)	16	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	4年	2年	2年
マキシエンスV (FB)	14	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	3年	1年	2年
プレミエンス (FC)	12	◎	○	◎	△	△	◎	○	2年	—	1年
プレミエンスV (FD)	10	◎	△	◎	—	△	◎	○	2年	—	1年

※リオネットプラスシリーズ内での相対評価です。 ※機種ごとの機能の詳細はP.42～45をご確認ください。 ※保証の詳細はP.52～53をご確認ください。

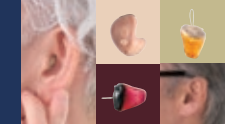

耳あな型オーダーメイド

NEW HI-C3



軽度 中等度

NEW HI-C1



軽度 中等度 高度

NEW HI-C2



軽度 中等度 高度

NEW HI-G7



中等度 高度 重度

※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。

カラーコーディネートとオプションで “自分専用”を叶えます。

選べる豊富な形状とカラーバリエーション



カラーバリエーション

詳しくはこちら▶

フェイスプレート ベージュ チョコ ブラウン ブラック

シェル ベージュ オレンジ パープル レッド
ブルー グレー

※HI-G7は、フェイスプレート、シェル共にベージュのみ。



HI-C1

対応カラー
フェイスプレート
シェル



HI-C2

対応カラー
フェイスプレート
シェル

さまざまなオプション

もっと“自分専用”の補聴器
にカスタマイズできます。

※表面加工の梨地は、標準と色味・質感が異なります。

※他にもさまざまなオプションをご用意しています。詳しくは販売店までお問い合わせください。

ボタン



メモリー ポリウーム

取り出し



取り出し
ワイヤー リング
ワイヤー

表面



標準 梨地

●販売名:補聴器HI-C3FA
●販売名:補聴器HI-C1FA
●販売名:補聴器HI-C2FA

●販売名:補聴器HI-G7FA
●販売名:補聴器HB-A5FA

●販売名:補聴器HI-C3FB
●販売名:補聴器HI-C1FB
●販売名:補聴器HI-C2FB

●販売名:補聴器HI-G7FB
●販売名:補聴器HB-A5FB

耳かけ型 GOOD DESIGN

NEW HB-A5



フック

軽度 中等度 高度

Sチューブ(オプション)

軽度 中等度 高度

デザインと操作性のバランスを 計算し尽くした設計です。

押しやすいボタン形状

装着時においてもボタンの
位置を容易に把握・操作
できます。

スタイリッシュな配色


視覚的に小さく見える効果
のあるツートンカラーを採
用しています。



高い操作性を追求した設計

親指で支えながら操作できるため安定します。

カラーバリエーション

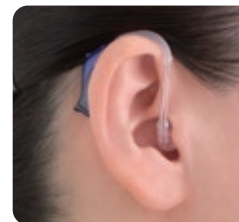

リオネットカーブ

日本人の耳に合った最適
な形で確かなフィット感を
生み出します。

●販売名:補聴器HI-C3FC
●販売名:補聴器HI-C1FC
●販売名:補聴器HI-C2FC

●販売名:補聴器HI-G7FC
●販売名:補聴器HB-A5FC

●販売名:補聴器HI-C3FD
●販売名:補聴器HI-C1FD
●販売名:補聴器HI-C2FD

●販売名:補聴器HI-G7FD
●販売名:補聴器HB-A5FD

LSシリーズ ラインアップ

主な特長

- 快適な聞こえをお求めやすく。
- 騒音抑制・衝撃音低減などを搭載し、快適性を実現。

耳あな型オーダーメイド

HI-C1LS



軽度 中等度 高度

HI-C2LS



軽度 中等度 高度

HI-G7LS



中等度 高度 重度

選べる
カラーシェル
(無料オプション)

HI-C1



カラー
バリエーション



耳かけ型

HB-A2LS



RIC
EXスモールイヤホン

軽度 中等度

HB-A4LS



フック

軽度 中等度 高度

RITE ミディアム
イヤホン



軽度 中等度 高度

Sチューブ
(オプション)



軽度 中等度 高度

その他ラインアップ

リオネットシリーズ

マキシエンス(AA) **4年保証** マキシエンスV(AB) **3年保証**

プレミエンス(AC)、プレミエンスV(AD) **2年保証**

耳かけ型

- リオネットエンジン搭載で自然な聞こえに。
- 選べる4つのグレードラインアップ。

HB-A3



RIC
EXスモール
イヤホン

軽度 中等度

HB-A5



フック

軽度 中等度 高度

HB-A6



フック

軽度 中等度 高度

RITE
ミディアム
イヤホン

軽度 中等度 高度

Sチューブ
(オプション)

軽度 中等度 高度

Sチューブ
(オプション)

軽度 中等度 高度

カラーバリエーション



マキシエンス・マキシエンスV (9色)

プレミエンス (7色)

プレミエンスV (5色)


ワイヤレス対応アイテム

HB-A6のみ使用可能



スマートコントロール*1 (スマートフォンアプリ)

*1 スマートコントロールは、Android端末専用のスマートフォンアプリです。
*対応OS、対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

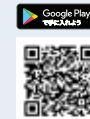

ワイヤレスアダプター
[RH-05] **2年保証**



スティックリモコン
[RH-06] **2年保証**



●販売名:補聴器HB-A3AA
●販売名:補聴器HB-A5AA
●販売名:補聴器HB-A6AA

●販売名:補聴器HB-A3AB
●販売名:補聴器HB-A5AB
●販売名:補聴器HB-A6AB

●販売名:補聴器HB-A3AC
●販売名:補聴器HB-A5AC
●販売名:補聴器HB-A6AC

●販売名:補聴器HB-A3AD
●販売名:補聴器HB-A5AD
●販売名:補聴器HB-A6AD

ハイパワーシリーズⅡ **2年保証**

ハイグレードモデル
HB-P1PC

ベーシックモデル
HB-P1PS

シンプルモデル
HB-P1PL

- ゆとりある出力・利得を持った高出力デジタル補聴器。
- 高い耐衝撃性。

カラー
バリエーション



●販売名:補聴器HB-P1PC ●販売名:補聴器HB-P1PS ●販売名:補聴器HB-P1PL



耳かけ型

中等度 高度 重度

LS シリーズ	機能						保証	
	デジタル信号処理 (バンド)	音声強調	騒音抑制	衝撃音低減	指向性	ハウリング キャンセラー	無料修理 (自然故障)	事故補償
	きめ細かい 調整	言葉を 聞きとり やすく	騒がしい 場所でも 聞きとりやすく	突発的な 音を抑える	正面の声を 聞きとり やすく	ピーピー音を 抑える		
	10	○	○	○	○	○	2年	1年

※機種ごとの機能の詳細はP.44～45をご確認ください。 ※保証の詳細はP.52～53をご確認ください。

●販売名:補聴器HI-C1LS ●販売名:補聴器HI-C2LS ●販売名:補聴器HI-G7LS ●販売名:補聴器HB-A2LS ●販売名:補聴器HB-A4LS

ハイパワーシリーズⅡ^ツ 2年保証

ハイグレードモデル
HB-G7PC

ベーシックモデル
HB-G7PS

シンプルモデル
HB-G7PL

- 「適応型指向性機能」が周囲（横や後方などから）の音を抑制することで、正面の会話音声を聞きとりやすくします。



耳かけ型

中等度 高度 重度

カラー
バリエーション



●販売名:補聴器HB-G7PC ●販売名:補聴器HB-G7PS ●販売名:補聴器HB-G7PL

HB-A6ES 2年保証

- 両耳装用にもおすすめのリーズナブルモデル。
- 扱いやすいケースに指向性や音声強調など、充実の機能を搭載。

カラー
バリエーション



●販売名:補聴器HB-A6ES



耳かけ型

軽度
中等度
高度

HB-D8シリーズ 1年保証

HB-D8C | HB-D8L

- お求めやすい価格で優しい音質のノンリニアタイプのHB-D8Cと音量感豊かなリニアタイプのHB-D8L。
- イヤホンクロス、マイククロス対応*。
(当社工場での仕様変更が必要です)

*イヤホンクロス、マイククロスにつきましては、販売店までご相談ください。

カラー
バリエーション



●販売名:補聴器HB-D8C ●販売名:補聴器HB-D8L



トリマー式

耳かけ型

HB-D8C HB-D8L

軽度 軽度
中等度 中等度
高度 高度

リオネット ウィー 1年保証

HI-C1CV | HI-C2CV | HI-G7CV

- はじめやすく、目立ちにくく、快適に。
- 重度難聴までカバーするラインアップ。

選べる
カラーシェル
(無料オプション)



●販売名:補聴器HI-C1CV ●販売名:補聴器HI-C2CV ●販売名:補聴器HI-G7CV

オーダーメイド
耳あな型



HI-C1CV HI-C2CV HI-G7CV

軽度 軽度 中等度
中等度 中等度 高度
高度 高度 重度

HC-A1 (既製耳あな型) 1年保証

- お求めやすい価格で簡単装用。
- 耳型採取は不要、すぐにお使いいただけます。
- ノンリニアタイプ。

●販売名:補聴器HC-A1



トリマー式
耳あな型

軽度
中等度

HD-34 1年保証

- 音声強調や騒音抑制機能で快適な聞こえ。
- ゆとりある出力で重度難聴にも対応。



●販売名:補聴器HD-34

ポケット型

中等度
高度
重度

HA-43 (アナログ) 1年保証

- 別売のY型イヤホンコードを使用すれば、両耳で使用できます。



●販売名:補聴器HA-43

トリマー式
ポケット型

中等度
高度

HB-M1 (アナログ) 1年保証

1年保証

トリマー式
耳かけ型

軽度
中等度

●販売名:補聴器HB-M1



TH-1105 (骨導メガネ型) 1年保証

1年保証

トリマー式
メガネ型

軽度
中等度

●販売名:コルチトーン TH-1105



子ども向けほちょうき“リオネットピクシー”

Kids
ほちょうき
RIONET PIXY
リオネットピクシー

2年保証



ハイグレードモデル
HB-P1PC

ベーシックモデル
HB-P1PS

シンプルモデル
HB-P1PL

耳かけ型

中等度

高度

重度

●販売名:補聴器HB-P1PC

●販売名:補聴器HB-P1PS

●販売名:補聴器HB-P1PL

安心機能



電池誤飲
防止機能



LED
ユニット



落下防止
ストラップ



体積約25%
重量約20%
ダウン



電池⊕⊖
OK、
おまかせ回路



不快な
雑音を抑制



耐汗コート
を採用



耐衝撃性

PIXY
ピクシーくん



詳しい紹介は
Webサイトへ!



聞こえで困っている子ども
たちの力になりたいくて、あ
る日リオネットピクシーの
ほちょうきから実体化した
妖精だよ。

限定モデル キャラクターほちょうき

子どもたちに、愛着を持って
補聴器を使い続けていただ
きたいという想いから、リオ
ネットの公式キャラクター
ピクシーくんの「キャラクター
ほちょうき」が誕生しました!



キッズ応援プロジェクト

リオネット補聴器

キッズ **応援** プロジェクト

“聞こえる”から生まれる、未来を育てたい。

すべての子どもに“聞こえる”から生まれる、新しい可能性にチャレンジしてほしい。

そんな願いを込めて、リオネット補聴器は
「キッズ応援プロジェクト」に取り組んでいます。



ほちょうき 購入サポート

リオネット補聴器がさらに身近に。20歳以下の方には、
補聴器を特別にお求めやすくご購入いただけるシステムをご用意しました。

学研と学習教材「耳と補聴器のひみつ」を発刊

Gakken × リオン株式会社

学研とタイアップし、「耳と補聴器のひみつ」を刊行
し全国の約20,600*の小学校、約3,200の公立図
書館に寄贈。補聴器の「なるほど」や「ひみつ」を小
学生に届けます。

*2015年時点

学研「まんがでわかるシリーズ」
「耳と補聴器のひみつ」
電子版はこちらから!



詳しい紹介は
Webサイトへ!



電池／空気電池

空気電池 無水銀タイプ(各8個入り)



PR44 PR48 PR41 PR536

空気電池用電池チェッカー



BC-06

電池(各4本入り)

LR03(単4形アルカリ) R6P(単3形マンガン)

リオネット純正交換部品

耳せん



耳あな耳せん(HC-A1用)
(S・M・L・LL) 耳せん
(S・MS・M・ML・L・LL) ソフト耳せん
(SS・S・MS・M) ベント付き耳せん
(S・MS・M・ML)



オープン耳せん
(S・MS・M) Sチューブ用
オープン耳せん
(S・S+・MS・MS+・M) Sチューブ用
クローズ耳せん
(S・S+・MS・MS+・M) Sチューブ用
チューリップ耳せん

ジョイント／チューブ(耳かけ型用) ※他にも各種ありますので詳しくは販売店にお問い合わせください。



ジョイント(A1・A2)
(ポケット型用) チューブ付き
ジョイント(B・C・D・G) 防滴チューブ付き
ジョイント(B・C・D・G) 透湿チップ付きジョイント
(C)

フック(耳かけ型用) ※他にも各種ありますので詳しくは販売店にお問い合わせください。



ノーマルフック
(S・M・L) Eフック
(S・M・L) フック(S・M・L)
HB-D8タイプ用 フック(S・M・L)
HB-P1タイプ用 フック(S・M・L)
HB-G7タイプ用 フック(S・M・L)
HB-A5・HB-A4・
HB-A6タイプ用

Sチューブ



Sチューブ
R/L(0~5)
HB-D8タイプ用 Sチューブ
R/L(0~5)
HB-A5・HB-A4・
HB-A6タイプ用

スマートイヤホン



EX スモール
イヤホン
R/L(1~4)
HB-A8タイプ用 ミディアム
イヤホン
R/L(1~4)
HB-A8タイプ用 EX パワー
イヤホン
R/L(ブラウン・ベージュ)
HB-A8タイプ用 EX スモール
イヤホン
R/L(1~4)
HB-A3・HB-A2
タイプ用 ミディアム
イヤホン
R/L(0~5)
HB-A3・HB-A2
タイプ用

イヤホン／イヤホンコード(HD-34・ポケット型アナログ用)



イヤホン 2極
ベージュ・黒 イヤホン 3極
ベージュ・黒 イヤホンコード 2極
ベージュ・RC-89
グレー・RC-10 イヤホンコード 3極
ベージュ・RC-86
グレー・RC-11 Y型イヤホンコード 2極
HA-43のみ対応。
コードの長さは60・80cmが
あります。

※コードの長さは45・60・85cm、2m、3mがあります(HD-34、HA-43は2m、3m非対応)。

耳あか防止チップ



Gキット(9ヶ入り) Gキット(9ヶ入り)(赤・青)
リオネットプラス用 SSキット(5ヶ入り)

イヤモールド／オーダーイヤチップ

イヤモールド(耳かけ型・ポケット型用)

- 音漏れによる不快感をより軽減します。
- 補聴器の脱落を防止します。
- ハード(硬質)とソフト(軟質)があります。



カラーバリエーション



オーダーイヤチップ※

※写真はイヤホンに装着された状態です。



オーダーイヤチップ※
(グレー・ベージュ)
HB-A8タイプ用



オーダーイヤチップ※
(ベージュ・クリア)
HB-A5・HB-A4・HB-A6・HB-D8
タイプ用




オーダーイヤチップ※
(EX スモールイヤホン用) (クリア)
HB-A3・HB-A2タイプ用



オーダーイヤチップ※
(ミディアムイヤホン用) (クリア)
HB-A3・HB-A2タイプ用

携帯ケース／カバー／ストラップ

携帯ケース

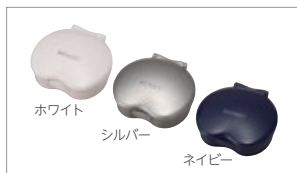

耳あな型用携帯ケース
ホワイト(S・M・L・LL)
シルバー・ネイビー(S・M・L)



耳かけ型用携帯ケース
(S・M)



携帯ケース
(M・L)

カバー



耳かけ補聴器カバー(各色 大・中・小)

ストラップ




クリップ付ストラップ
(落下防止用)
HB-P1タイプ用

お手入れ用品



リオネットクリーニングキット 7点セット
●エアブロー ●ウェス ●綿棒 ●乾燥ケース
●ブラシ(マグネット付き) ●空気電池用電池
チェッカー●補聴器クリーニング専用シート

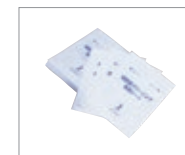

補聴器クリーニング
専用シート10枚1組



取れ太クン
(耳あか防止チップクリーナー)



クリーンmini Plus
(K1901)



クイックエイド
(補聴器専用乾燥器) 本体/
クレイドル/詰替用乾燥剤



乾燥ケース
本体/詰替用乾燥剤

聞こえを支援する周辺機器




おしらせらんぷ
[BA-05]
電話の音やドアチャイム、ドアが開いたことなどを、光・振動・メッセージでお知らせします。受信機は持ち運びに便利な携帯用サイズです。



みみもとくんエクサII
[GP-25]
赤外線を用いて、テレビの音声をスピーカー(レシーバー)に送ります。テレビの音量を上げなくても音声を耳もとで聴くことができます。

FM受信機J2*1を使用する際やイヤホンクロス(オプション)として使用する際に補聴器に取り付けます。

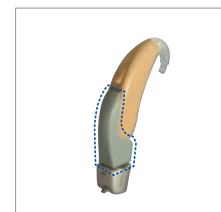

接続シュー付き電池
ホルダー*2[CC-P1]
対応機種:HB-P1PC・P1PS・P1PL



接続シュー*2
[CC-G7]
対応機種:HB-G7PC・G7PS・G7PL

*1 販売終了。 *2 写真の補聴器本体、FM受信機は含まれません。

俳優・歌手 井上順さん



リオネット補聴器アンバサダー 井上順さん

気づかないうちに 衰えてきた聴力。
ある日突然 難聴と告げられ びびり。
今度は リオネットにお会って 嬉しい びびり。
“昔は こんなに聞こえていたんだ”と
生まれ変わった 気分です。
この喜びを 難聴でお悩みの
皆さんと 分かち合えたら //

井上順

補聴器を着けて、
たくさんの人と出会い、話し、
その笑顔を見ることが、
元気に生きる秘訣です。

いつまでも若く生きる秘訣は、たくさん
の人の笑顔に出会うこと。笑顔には、人
を幸せにする力があります。だから僕は、
いろんな人と出会い、お話しをするのが
大好きなんです。

そんな僕も、人と話すのがいやになった
時期がありました。若い頃から音楽を
やっていたせいか、50代になってから、稽
古をしてもテレビを見ても、聞こえづら
い。「え？」と聞き返すのがいやで、飲み会
の誘いも断るようになっていました。

感音難聴と診断を受けたときはショック
でした。けれど幸運なことに素晴らしい先
生と補聴器に若いうちに出会えた。両耳
に補聴器を着けたときは、生まれ変わった
ような心地がしたものです。もっと早く着
ければ良かったと後悔すらしめた(笑)。



最初は「補聴器なんて、着ければいいん
だろう」と軽く考えていましたが、やはり
着けっぱなしではだめですね。何度も調
整を重ねるたびに、自分の耳に馴染んで
いくのを実感しました。

今は「僕は難聴だよ」と隠さずに伝えて
います。そうすると皆は「順ちゃん、そん
なの気にしないよ」と言って、歌や演技を
支えてくださる。聞こえに向き合えば、い
くつからでも人生の可能性は広がってい
きます。胸を張って補聴器を着け、第二の
青春を楽しみましょう。

詳しくはWebサイトへ
www.rionet.jp/ambassador/



プロボディボーダー YUMIEさん



リオネット補聴器アンバサダー YUMIEさん

**普通の人とは
聞こえる事が当たり前なのだけれど
私にはこうして補聴器をする事で
聞こえる事がとても幸せです。**

私は聞く事を諦めない。
補聴器が私の宝物。

私は2歳の時に突発性、進行性の感音難聴になりました。

以来3歳からずっと補聴器にお世話になっています。最初はポケット型から今は耳かけ型、耳あな型と本当に色々な補聴器にお世話になっています。

20歳の時に人工内耳の手術が出来るチャンスがあったのですが、波が頭に当たったり、ボードが当たったりする可能性もあるのでボディボードはやめた方がいいかもしれない、と言われ、手術をしない人生を選びました。

その時25歳までの聴力だとお医者さんに言われていたので、聞こえる世界があると5年だと思うと、とても不安でした。

でもその時にお医者さんが「補聴器の技術がどんどん進化してるから、追いつくかもしれないね。」と言ってくれたのを覚えています。今ではその通りになりました。

30歳にして初めて両耳装用になり、雨の音やセミの鳴く音、コオロギの音楽や蛙の大合唱、クリスマスの時期には商店街で流れる楽しいクリスマスソングが聞こえて、私の世界は大きく広がりました。



何より人との会話が楽しいです。マスクをしてる人の口が読めなくても、(読唇術で会話を読み取るため)ちゃんと耳で聞いている自分が居る事がわかるのです。防水型補聴器が出た時には、早速海へ行きました。友達の賑やかな声や、波の音が聞こえて、とても感動しました。「世の中は楽しい音に囲まれてる!」私は今でも新しく聞こえてくる音が何の音なのか、その音の元を探します。

私は聞く事を諦めない。今では補聴器が宝物になっています。

性能一覧

型式		聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度の最大レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	C/C (チャンネル数)	O/P C (チャンネル数)	C/K/T/K (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	A/N/R	騒音抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	両耳間通信	データロギング	マルチメモリー (数)	スタートメモリー 設定機能	ミューズ機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能	
					HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																									
リオネット2シリーズ	マキエンス	HI-C7DA	30~95*3 /45~110*4	内蔵 充電電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	24	24	24	CK (24)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	—	○	6	○	○	—	—	—	68	セルフ調整機能・風雑音低減・ スタート時間設定機能・電池 残量お知らせ音・耐汗コート
		HB-A8DA	~70*6 /25~90*7 /50~110*8	内蔵 充電電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /129*8	—	24	24	24	CK (24)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	—	○	6	○	○	—	—	—	68	
	マキエンス	HI-C7DB	30~95*3 /45~110*4	内蔵 充電電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	18	18	18	CK (18)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	—	○	6	○	○	—	—	—	68	
		HB-A8DB	~70*6 /25~90*7 /50~110*8	内蔵 充電電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /129*8	—	18	18	18	CK (18)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	—	○	6	○	○	—	—	—	68	
	プーエンス	HI-C7DC	30~95*3 /45~110*4	内蔵 充電電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	12	12	12	CK (12)	○	○	○	—	○	固定・適応	○	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	68	風雑音低減・スタート時間設定機能・ 電池残量お知らせ音・耐汗コート
		HB-A8DC	~70*6 /25~90*7 /50~110*8	内蔵 充電電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /129*8	—	12	12	12	CK (12)	○	○	○	—	○	固定・適応	○	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	68	
	プーエンス	HI-C7DD	30~95*3 /45~110*4	内蔵 充電電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	10	10	10	CK (10)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	68	
		HB-A8DD	~70*6 /25~90*7 /50~110*8	内蔵 充電電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /129*8	—	10	10	10	CK (10)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	68	
	クオエンス	HI-C7DE	30~95*3 /45~110*4	内蔵 充電電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	8	8	8	CK (8)	○	—	○	—	○	固定	○	—	○	—	○	4	○	○	—	—	—	68	
		HB-A8DE	~70*6 /25~90*7 /50~110*8	内蔵 充電電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /129*8	—	8	8	8	CK (8)	○	—	○	—	○	固定	○	—	○	—	○	4	○	○	—	—	—	68	

リオネットプラスシリーズ	オーダーメイド マキエンス	HI-C3FA	25〜75	PR536	約70〜85	32	37	107	111	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	風雑音低減・スタート時間設定機能 お知らせ音・ 耐汗コート・おまかせ回路	
		HI-C1FA	〜85	PR536	約65〜90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	6*11	△	△	○*12	—	—		—
		HI-C2FA	〜90	PR41	約115 〜165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	6	○	○	○	—	—		—
		HI-G7FA	50〜110	PR48	約210 〜265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	6	○	○	○	—	△		—
		耳かけ型 HB-A5FA	〜95*10/〜80*9	PR41	約150*10 /約135*9	56*10/42*9	63*10/54*9	125*10/111*9	130*10/125*9	80*10/66*9	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ・ 耳介効果	○	○	—	—	○	6	○	○	○	MTB	—		—
	オーダーメイド マキエンス	HI-C3FB	25〜75	PR536	約70〜85	32	37	107	111	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—		—
		HI-C1FB	〜85	PR536	約65〜90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4*11	△	△	○*12	—	—		—
		HI-C2FB	〜90	PR41	約115 〜165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	—		—
		HI-G7FB	50〜110	PR48	約210 〜265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	△		—
		耳かけ型 HB-A5FB	〜95*10/〜80*9	PR41	約150*10 /約135*9	56*10/42*9	63*10/54*9	125*10/111*9	130*10/125*9	80*10/66*9	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ	○	○	—	—	○	4	○	○	○	MTB	—		—

●表はJIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) で表示しています。 ●【 】内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、ワイヤレス機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ○は標準搭載 △はオプション ●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 EXスモールイヤホン *7 ミディアムイヤホン *8 EXパワーイヤホン *9 Sチューブ(オプション) *10 フック *11 磁気メモリー切替機能設定時もしくはメモリー切替ボタン搭載時 *12 おまかせテレホンもしくは磁気メモリー切替機能どちらか一方の機能をお使いいただけます

性能一覧

型式		聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル 入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	AINR	騒音抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	両耳間通信	データロギング	マルチメモリー 数	スタートメモリー 設定機能	ミューズ機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	防水防塵保護等級 (IP)	その他機能		
					HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																										
リオネットプラスシリーズ	オーダーメイド プレミックス	HI-C3FC	25〜75	PR536	約70〜85	32	37	107	111	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	△	△	△	○	—	—	風雑音低減・スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート・おまかせ回路
		HI-C1FC	〜85	PR536	約65〜90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	△4	△	△	○	—	—	—		
		HI-C2FC	〜90	PR41	約115〜165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	—	—		
		HI-G7FC	50〜110	PR48	約210〜265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	△	—		
	耳かけ型	HB-A5FC	〜95*9/〜80*8	PR41	約150*9/約135*8	56*9/42*8	63*9/54*8	125*9/111*8	130*9/125*8	80*9/66*8	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応	○	○	—	—	○	4	○	○	○	MTB	—	—		
	オーダーメイド プレミックス	HI-C3FD	25〜75	PR536	約70〜85	32	37	107	111	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		HI-C1FD	〜85	PR536	約65〜90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	○	△4	△	△	○	—	—	—		
		HI-C2FD	〜90	PR41	約115〜165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	—	—		
		HI-G7FD	50〜110	PR48	約210〜265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	△	—		
	耳かけ型	HB-A5FD	〜95*9/〜80*8	PR41	約150*9/約135*8	56*9/42*8	63*9/54*8	125*9/111*8	130*9/125*8	80*9/66*8	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	—	○	4	○	○	○	MTB	—	—		
LSシリーズ	オーダーメイド	HI-C1LS	〜80	PR536	約105〜155	41*2/36*1	46*2/41*1	107*2/103*1	112*2/107*1	—	10	4	4	HTK・LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	△4	△	△	—	—	—	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート・おまかせ回路	
		HI-C2LS	〜90	PR41	約160〜235	47*3/43*2	51*3/52*2	117*3/110*2	119*3/117*2	—	10	4	4	HTK・LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	—	—	—			
		HI-G7LS	50〜110	PR48	約310〜370	58*5/54*4	65*5/61*4	126*5/124*4	132*5/130*4	—	10	4	4	HTK・LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	—	△	—			
	耳かけ型	HB-A2LS	〜70*6/25〜85*7	PR41	約220*6/約190*7	38*6/43*7	42*6/49*7	105*6/114*7	111*6/115*7	—	10	4	4	HTK・LTK	○	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	—	○	4	○	○	—	—	—	—		
		HB-A4LS	〜95*9/〜80*8	PR41	約190*9/約180*8	56*9/41*8	61*9/53*8	125*9/111*8	130*9/124*8	88*9/73*8	10	4	4	HTK・LTK	○	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	—		

●表はJIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) で表示しています。 ●[]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、ワイヤレス機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ○は標準搭載 △はオプション ●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 EXスモールイヤホン *7 ミディアムイヤホン *8 Sチューブ(オプション) *9 フック

性能一覧

型式		聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力 音圧レベル (dB)		誘導コイル 入力の最大 感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	C R C (チャンネル数)	O P C (チャンネル数)	C K / T K (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	A I N R	騒音抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	両耳間通信	データロギング	マルチメモリー(数)	設定機能	スタートメモリー	ミューズ機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
					HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																									
リオネットシリーズ	マキシムス	HB-A3AA	〜70 ^{*6} /25〜85 ^{*7}	PR41	約155 ^{*6} /約150 ^{*7}	38 ^{*6} /43 ^{*7}	43 ^{*6} /46 ^{*7}	105 ^{*6} /114 ^{*7}	111 ^{*6} /116 ^{*7}	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ・ 耳介効果	○	○	—	—	○	6	○	○	○	—	—	—	風雑音低減・スタート時間設定機能・お知らせ音・ 耐汗コート・おまかせ回路
		HB-A5AA	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR41	約150 ^{*9} /約135 ^{*8}	56 ^{*9} /42 ^{*8}	63 ^{*9} /54 ^{*8}	125 ^{*9} /111 ^{*8}	130 ^{*9} /125 ^{*8}	80 ^{*9} /66 ^{*8}	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ・ 耳介効果	○	○	—	—	○	6	○	○	○	MTB	—	—	
		HB-A6AA	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR48	約175 ^{*9} /約180 ^{*8}	57 ^{*9} /40 ^{*8}	63 ^{*9} /59 ^{*8}	128 ^{*9} /111 ^{*8}	133 ^{*9} /127 ^{*8}	89 ^{*9} /71 ^{*8}	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ・ 耳介効果	○	○	○	○	○	6	○	○	○	MTB	—	—	
	マキシムスV	HB-A3AB	〜70 ^{*6} /25〜85 ^{*7}	PR41	約155 ^{*6} /約150 ^{*7}	38 ^{*6} /43 ^{*7}	43 ^{*6} /46 ^{*7}	105 ^{*6} /114 ^{*7}	111 ^{*6} /116 ^{*7}	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	—	—	
		HB-A5AB	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR41	約150 ^{*9} /約135 ^{*8}	56 ^{*9} /42 ^{*8}	63 ^{*9} /54 ^{*8}	125 ^{*9} /111 ^{*8}	130 ^{*9} /125 ^{*8}	80 ^{*9} /66 ^{*8}	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ	○	○	—	—	○	4	○	○	○	MTB	—	—	
		HB-A6AB	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR48	約175 ^{*9} /約180 ^{*8}	57 ^{*9} /40 ^{*8}	63 ^{*9} /59 ^{*8}	128 ^{*9} /111 ^{*8}	133 ^{*9} /127 ^{*8}	89 ^{*9} /71 ^{*8}	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応・ おまかせ	○	○	○	○	○	4	○	○	○	MTB	—	—	
	プレジエンツ	HB-A3AC	〜70 ^{*6} /25〜85 ^{*7}	PR41	約155 ^{*6} /約150 ^{*7}	38 ^{*6} /43 ^{*7}	43 ^{*6} /46 ^{*7}	105 ^{*6} /114 ^{*7}	111 ^{*6} /116 ^{*7}	—	12	8	12	TK(8)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	—	—	
		HB-A5AC	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR41	約150 ^{*9} /約135 ^{*8}	56 ^{*9} /42 ^{*8}	63 ^{*9} /54 ^{*8}	125 ^{*9} /111 ^{*8}	130 ^{*9} /125 ^{*8}	80 ^{*9} /66 ^{*8}	12	8	12	TK(8)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	—	○	4	○	○	○	MTB	—	—	
		HB-A6AC	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR48	約175 ^{*9} /約180 ^{*8}	57 ^{*9} /40 ^{*8}	63 ^{*9} /59 ^{*8}	128 ^{*9} /111 ^{*8}	133 ^{*9} /127 ^{*8}	89 ^{*9} /71 ^{*8}	12	8	12	TK(8)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	○	○	○	4	○	○	○	MTB	—	—	
	プレジエンツV	HB-A3AD	〜70 ^{*6} /25〜85 ^{*7}	PR41	約155 ^{*6} /約150 ^{*7}	38 ^{*6} /43 ^{*7}	43 ^{*6} /46 ^{*7}	105 ^{*6} /114 ^{*7}	111 ^{*6} /116 ^{*7}	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	—	○	4	○	○	○	—	—	—	
		HB-A5AD	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR41	約150 ^{*9} /約135 ^{*8}	56 ^{*9} /42 ^{*8}	63 ^{*9} /54 ^{*8}	125 ^{*9} /111 ^{*8}	130 ^{*9} /125 ^{*8}	80 ^{*9} /66 ^{*8}	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	—	○	4	○	○	○	MTB	—	—	
		HB-A6AD	〜95 ^{*9} /〜80 ^{*8}	PR48	約175 ^{*9} /約180 ^{*8}	57 ^{*9} /40 ^{*8}	63 ^{*9} /59 ^{*8}	128 ^{*9} /111 ^{*8}	133 ^{*9} /127 ^{*8}	89 ^{*9} /71 ^{*8}	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	○	○	○	4	○	○	○	MTB	—	—	
ハイパワースシリーズⅡ	耳かけ型	HB-P1PC	60〜120	PR44	約460	70	79	130	138	100	10	4	10	HTK・LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・ 耐汗コート・おまかせ回路	
		HB-P1PS	60〜120	PR44	約460	70	79	130	138	100	8	4	6	HTK・LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	4	—	○	—	MTB	—	—		
		HB-P1PL	60〜120	PR44	約460	70	79	130	138	100	6	2	4	TK	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	4	—	○	—	MTB	—	—		
		HB-G7PC	60〜120	PR44	約430	70	80	131	140	103	10	4	10	HTK・LTK	○	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—		—
		HB-G7PS	60〜120	PR44	約430	70	80	131	140	103	8	4	6	HTK・LTK	○	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	—	○	4	—	○	—	MTB	—		—
		HB-G7PL	60〜120	PR44	約430	70	80	131	140	103	6	2	4	TK	—	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	—	—	4	—	○	—	MTB	—		—

●表はJIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) で表示しています。 ●[]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、ワイヤレス機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ○は標準搭載 △はオプション
●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 EXスモールイヤホン *7 ミディアムイヤホン
*8 Sチューブ(オプション) *9 フック

性能一覧

型式		レ聴 レベル (dBHL)	使用電池	(電池寿命 (連続時間))	最大 音響利得 (dB)		90dB入力最大出力 音圧レベル (dB)		誘導 コイル 感度 レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド 数)	CRC (チャ ン ネ ル 数)	OPC (チャ ン ネ ル 数)	HC・LC/ CK/TK (チャ ン ネ ル 数)	音声強調	衝撃音低減	騒音抑制	ハウリング キャンセラー	音質調整器	データ ロギング	マルチ メモリー (数)	ミュー ト機能	誘導コイル	外部入力	防水・防塵 (保護等級 (IP))	その他機能	
					HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																		
耳かけ型	HB-A6ES	～95*7/～80*6	PR48	約290*7 /約280*6	55*7/41*6	57*7/58*6	122*7/109*6	124*7/125*6	88*7/75*6	8	2	4	HTK・LTK	○	○	○	○	—	○	4	○	○	—	—	指向性・スタート時間設定機能・お知らせ音・ 耐汗コート・おまかせ回路	
シリ ーズ	耳 か け 型	HB-D8C	～80*7	PR48	約325*7 /約350*6	53*7/40*6	57*7/50*6	123*7/109*6	126*7/119*6	87*7/73*6	—	—	○	HC・LC	—	—	○	○	—	—	—	○	△	—	お知らせ音・耐汗処理・おまかせ回路	
		HB-D8L	～90*7	PR48	約290*7 /約310*6	54*7/39*6	59*7/50*6	124*7/111*6	129*7/123*6	87*7/72*6	—	—	○	—	—	—	○	○	TONE H・L	—	—	—	○	△		—
ワイ ア レ ス	オ ー ダ ー メ イ ド	HI-C1CV	～80	PR536	約105～155	41*2/36*1	46*2/41*1	107*2/103*1	112*2/107*1	—	4	1	1	TK	—	—	○	○	—	—	△2	△	—	—	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・ 耐汗コート・おまかせ回路
		HI-C2CV	～90	PR41	約160～235	47*3/43*2	51*3/52*2	117*3/110*2	119*3/117*2	—	4	1	1	TK	—	—	○	○	—	—	△2	△	—	—	—	
		HI-G7CV	50～110	PR48	約310～370	58*5/54*4	65*5/61*4	126*5/124*4	132*5/130*4	—	4	1	1	TK	—	—	○	○	—	—	△2	△	—	—	—	
既製耳あな型		HC-A1	25～75	PR41	約180	35	41	109	113	—	—	—	○	—	—	—	○	○	TONE H	—	—	—	—	—	—	お知らせ音・耐汗コート・おまかせ回路
ポケット型		HD-34	50～110	単4形 アルカリ*8	約510	71	76	133	138	105	6	4	4	HTK・LTK	○	○	○	○	—	○	2	—	MTB	○	—	お知らせ音・おまかせ回路
ポケット型 (アナログ)		HA-43	40～90	単4形 アルカリ*8	約115	65	69	124	125	—	—	—	MOP	—	—	—	NS	—	TONE H・L	—	—	—	—	—	—	おまかせ回路
耳かけ型 (アナログ)		HB-M1	30～70	PR48	約215	50	55	119	125	—	—	—	MOP	—	—	—	NS	—	TONE H	—	—	—	—	—	—	耐汗処理・おまかせ回路

型式		聴カ レバ ル (dBHL)	使用電池	(電池寿命 (連続時間))	最大音響 機械感度 レベル (dB) ±5dB	90dB最大フォース レベル (dB)			誘導コイル 感度 (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド 数)	C R C (チャ ン ネ ル 数)	O P C (チャ ン ネ ル 数)	H C ・ L C / C K / T K (チャ ン ネ ル 数)	音声強調	衝撃音低減	騒音抑制	ハウリング キャンセラー	音質調整器	マルチ メモリ (数)	誘導コイル	外部入力	防水・防塵 保護等級 (IP)	その他機能
						1600Hz [±5dB]	500Hz	ピーク値 (以下)															
骨導メガネ型	TH-110S	30～60	PR44	約260	41	107	109	124	63	—	—	—	—	—	—	—	—	TONE H・L	—	○	—	—	お知らせ音

型式		聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル 感度レベル 入力の最大 [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	騒音抑制	指向性	ハウリング キャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	両耳間/双方向通信	データロギング	マルチメモリ数	設定機能	スタートメモリ	ミュート機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	防水・防塵 保護等級 (IP)	その他機能
					HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																								
ワイヤレス	耳かけ型	HB-P1PC	60~120	PR44	約460	70	79	130	138	100	10	4	10	HTK・LTK	○	—	○	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	—	スタート時間 設定機能・お 知らせ音・耐 汗コート・お まかせ回路	
		HB-P1PS	60~120	PR44	約460	70	79	130	138	100	8	4	6	HTK・LTK	○	—	○	○	—	○	—	—	○	4	—	○	—	MTB	—	—		
		HB-P1PL	60~120	PR44	約460	70	79	130	138	100	6	2	4	TK	—	—	○	○	—	○	—	—	—	4	—	○	—	MTB	—	—		

●表はJIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定)で表示しています。 ●[]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ●骨導メガネ型TH-110Sに対してはIEC 60118-9:1985で表示しています。
○は標準搭載 △はオプション ●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 Sチューブ(オプション) *7 フック
*8 単4形ニッケル水素充電電池も使用可能(電池寿命につきましては販売店にお問い合わせください)

機能一覧

ゲイン		聴力に合わせてより適した音量に調整します。
CRC		小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。
出力制限	OPC	大きな音をひずまないように抑えます。
	MOP	必要以上の強大声を、きっちりと抑えます。
HCK・HTK		高音域の圧縮がかかり始めるレベルを調整します。
LCK・LTK		低音域の圧縮がかかり始めるレベルを調整します。
CK・TK		圧縮がかかる音のレベルを調整します。
HC		高音域の小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。
LC		低音域の小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。
音声強調		音の成分を強調し、言葉を聞きとりやすくします。
残響抑制		音が響く場所での言葉の聞きとりを改善します。
衝撃音低減		言葉と雑音を区別し、不快な衝撃音を効果的に低減します。
AI NR		AI (人工知能) が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。
騒音抑制		騒がしい場所でも快適に聞こえるようにします。
指向性	NS	スイッチの切替で、街頭などでの騒音を効果的に低減します。
	適応・固定	周囲 (横や後方などから) の音を抑制することで、正面の会話音を聞きとりやすくします。
	おまかせスピーチ	360°の範囲で音声を検出し、騒音を抑制することで、どの方向からの音声も聞きとりやすくします。
	耳介効果	耳介の特性を反映させるので、より自然な聞こえが得られます。
ハウリングキャンセラー		高音域の利得を下げることなくハウリングを起きにくくします。
自動モード切替		補聴器が音の特徴を統計的に分析し、その環境により適した設定に自動的に切り替えます。
音質調整器	TONE H	低音域が聞こえすぎたり、低音域雑音がうるさい場合に調整します。
	TONE L	高音域が聞こえすぎたり、ハウリングが出る場合に調整します。
風雑音低減		風雑音を検出し、低減します。

ワイヤレス機能	テレビアダプター等と接続して、補聴器で直接テレビの音や音楽を聴くことができます。また、リモコンやスマートフォンアプリからボリューム、メモリーを調整することもできます。
セルフ調整機能	環境に応じてご自身で音質、デジタル機能を調整できます。
両耳間通信	リモコンまたはスマートフォンアプリを経由して、左右どちらか一方の補聴器を操作すると、もう一方の補聴器も連動します。
データロギング	使用環境を補聴器が記録することで、よりきめ細かな調整が迅速に行えます。
マルチメモリー	環境に応じて聞こえが選択できます。
磁気メモリー切替機能	付属の磁石棒を使って補聴器のメモリーを切り替えることができます。
スタートメモリー設定機能	電源を切る前のメモリーのままで補聴器がスタートします。
ミュート機能	音が出ない状態 (ミュート) にすることで、補聴器を外す際の不快なハウリングを起きにくくします。
スタート時間設定機能	電源を入れた後、数秒音を出さないことで補聴器を耳に入れるときのハウリングを起きにくくします。
電池残量/交換お知らせ音	電池の充電/交換時期を補聴器自体が音で知らせてくれます。
おまかせ回路	電池のプラス・マイナスを自動的に判断します。電池をどちら向きに入れても作動します。
おまかせテレホン	受話器を補聴器に近づけると、補聴器が電話用の設定に切り替わります。
誘導コイル	磁気誘導ループなどの音声 (磁波) をキャッチして、補聴器で聴くことができます。
MTB	マイク入力と誘導コイル入力のバランスを調整します。
外部入力	オーディオ機器やテレビなどの音声を、直接補聴器に入力できます。
耐汗コート	耐汗処理に加えて、汗や湿気などから補聴器を守り、耐久性を高めるコーティングを施しています。
耐汗処理	補聴器内部への汗の浸入を抑え、また汗が入ったときの部品の劣化を防ぐ処理を施しています。
防水・防塵保護等級 (IP)	JIS C 0920:2003 が定める、防水・防塵保護等級。 数字で等級を表しています。

無料修理

4年間の無料修理

お買い上げの日より4年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

対象

- ・リオネット2シリーズ マキシエンス
- ・リオネット2シリーズ マキシエンスV
- ・リオネットプラスシリーズ マキシエンス
- ・リオネットシリーズ マキシエンス

3年間の無料修理

お買い上げの日より3年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

対象

- ・リオネット2シリーズ プレミエンス
- ・リオネット2シリーズ プレミエンスV
- ・リオネットプラスシリーズ マキシエンスV
- ・リオネットシリーズ マキシエンスV

2年間の無料修理

お買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。
(上記以外の補聴器。但し、HB-D8C・D8L、HI-C1CV・C2CV・G7CV、HC-A1、HD-34、HA-43、HB-M1、TH-1105は1年間)

紛失補償

2年間の紛失補償

お買い上げの日より2年以内に、補聴器を紛失、破損、故障した場合、1回に限り同等機種による代替品提供(紛失、修理不能の場合)または無料修理をさせていただきます。

対象

- ・リオネット2シリーズ マキシエンス
- ・リオネットプラスシリーズ マキシエンス

1年間の紛失補償

お買い上げの日より1年以内に、補聴器を紛失、破損、故障した場合、1回に限り同等機種による代替品提供(紛失、修理不能の場合)または無料修理をさせていただきます。

対象

- ・リオネット2シリーズ マキシエンスV
- ・リオネットプラスシリーズ マキシエンスV
- ・リオネットシリーズ マキシエンス

火災、盗難などにあったときの事故補償

お買い上げの日より1年以内に、補聴器が破損、火災、盗難にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

(但し、リオネット2シリーズ マキシエンスは4年以内、リオネット2シリーズ マキシエンスV、リオネットプラスシリーズ マキシエンス、リオネットプラスシリーズ マキシエンスVは2年以内)

120日以内の無料調整

お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。

充電電池無料交換

お買い上げの日より4年以内に、リオネット2シリーズ マキシエンスは2回、リオネット2シリーズ マキシエンスVは1回に限り、充電電池を無料で交換させていただきます。(当社基準によります)

対象

- ・リオネット2シリーズ マキシエンス
- ・リオネット2シリーズ マキシエンスV

保証制度の詳細は
リオネット補聴器取扱販売店まで
お問い合わせください。



よくいただく質問

補聴器は難聴で届きにくくなった音の情報を伝え、コミュニケーションや日常生活を助けるものです。ここでは補聴器についてよくいただくご質問にお答えします。

Q.補聴器をつけたらどのくらい「聞こえ」が良くなるの？

A.聴力や言葉の聞きとりの程度によって異なります

主に日常会話が聞きとれる程度に補聴器を調整しますが、聴力によっては難しいこともあります。難聴の程度によって、補聴器で補うことのできる調整には限界があるからです。また、言葉の聞きとり能力の程度によっても、補聴器の効果は異なります。

Q.補聴器を買えば、すぐ良く聞こえるようになる？

A.新しい音の世界に慣れるためには、少し時間がかかることもあります

補聴器の効果を上げるためには、調整期間が必要です。オーダーメイド補聴器は、初めから使う方の聴力や耳の形状に合わせて作られていますが、さらに聞きやすくするために調整することもあります。既製品の補聴器も、使う方の聴力に合わせて調整する必要があります。

Q.補聴器の寿命はどれくらい？

A.使用環境や状況によって大きく異なります

補聴器は精密機械ですので、汗や汚れによって故障しやすくなります。障害者総合支援法における耐用年数では5年と定められていますが、使用する環境や頻度により大きく異なります。保証期間内に自然故障が生じた場合の修理は無料です。日頃のお手入れや、補聴器販売店での点検などを心がけていただくと故障しにくくなります。

Q.リオネット補聴器はどこで買える？

A.お近くのリオネット補聴器専門店または取扱店へ

補聴器に馴染みのない方の中には、補聴器専門店の存在をご存じない方が多いかもしれませんが、リオネット補聴器は全国にリオネット補聴器専門店または取扱店のネットワークを持っています。聴力に合わせた補聴器の選択を行いますので、補聴器をご使用になるご本人様の来店が必要です。ご購入後のアフターフォローや微調整のためにも、ご使用になる方のお住まいの近くのお店をおすすめします。お店以外では病院の耳鼻咽喉科で相談の上、補聴器外来で購入できる場合もあります。

補聴器Q&A rionet.jp/reassurance/

Webサイトでも、お客様からよく寄せられるご質問とその答えを掲載しています。ぜひご覧ください。



その聞こえのためにすべてを。

RIONET

聞こえのポータルサイト

my RIONET

詳しくはこちらから

my.rionet.jp



ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング（調整）することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング（調整）によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

●本カタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。●製品写真および色見本は印刷のため、色彩が実物と多少異なる場合があります。●本書の一部あるいは全部を無断で複製・複製することを禁じます。

※ Android、Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

※ Apple、iPhone、iPad、iPod touchおよびAppleのロゴは、Apple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、日本国内ではアイホン株式会社のライセンスに基づき使用しています。



本カタログは、環境に配慮したベジタブルオイルインキを使用しています。

UD FONT

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

2025 05 BA

リオネット補聴器お客様コールセンター

受付時間 9:00~21:00

フリー
ダイヤル **0120-2933-76**
FAX.042-359-7441

最新情報はWebサイトで

リオネット

検索

www.rionet.jp



リオネット補聴器は
東京2025デフリンピックを
応援しています。

デフリンピックは、
きこえない・きこえにくい人の
オリンピックです。



リオネット補聴器のご相談は・・・

リオン株式会社

本社 〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41